


Branfine

double booster




取扱説明書


各部名称

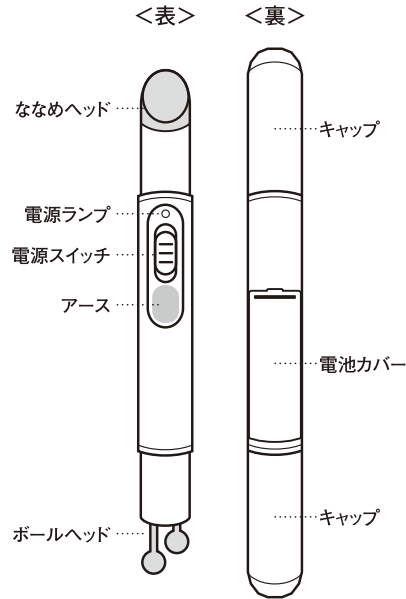

電池の入れ方

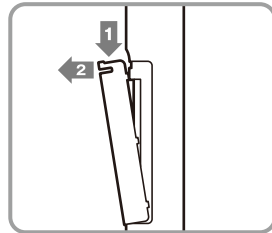

1. カバーをはずすためのくぼみがあるので、爪楊枝やペンなど細いものをひっかけてカバーをはずします。
※爪をひっかけるときは、けがをしないようにご注意ください。
※ご購入直後は、電池はセットされていません。

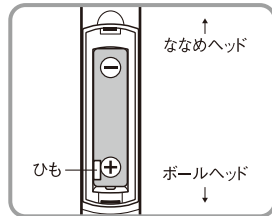


2. 単4電池のプラス側、マイナス側の向きを確認し、ひもは電池の下になるよう挿入してください。
※ひもは電池を取り外しやすくするためのものです。
3. 電池カバーを元に戻してください。

電池の交換時期


電池の残量がわずかになると、バイブレーションが止まります。バイブレーションが止まったら、電池をお取り替えてください。

電池の外し方

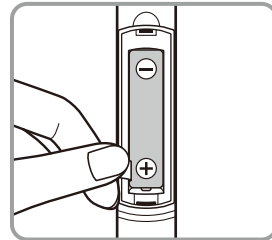


ひもを手前に引っ張り電池を取り出します。

使用方法

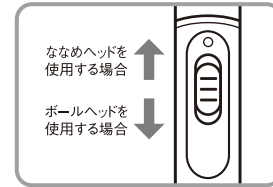

1. ○ななめヘッドを使用する場合
電源スイッチをななめヘッドの方へスライドしてください。
○ボールヘッドを使用する場合
電源スイッチをボールヘッドの方へスライドしてください。
バイブレーションの振動を感じたらスタンバイOK。

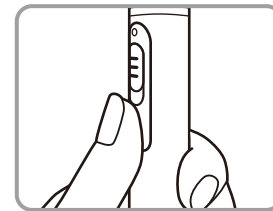

2. スイッチ下部にあるアースに指がふれるように持ちながら、ヘッドをお肌にあて、すべらせるようにしてお使いください。
3. 電源を切る場合は、電源スイッチを中央へ戻してください。

使用上の注意

- 本品を使うときは、必ず手を拭いてからご使用ください。
- 同じ場所に長くとどめずに、軽く動かしながらかご使用ください。
- 強く押しつけるのではなく、お肌の上をすべらせるようにしてお使いください。
- 使用中、強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲルをご使用することをお勧めします。
※それでも強い痛みを感じる場合は使用を中止してください。
- 1度に長い時間をかけるのではなく、毎日少しずつ継続的にケアしましょう。

お手入れ方法

使用後はやわらかい布やティッシュなどで拭き取り清潔に保管してください。
※水洗いはしないでください。
※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

仕 様

電源方式：単4形電池1本 ※付属電池はテスト用
商品サイズ：長さ約18.3×直径2cm（キャップ含む）
商品重量：約40g（電池除く・キャップ含む）
素 材：ABS樹脂/ステンレス

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

絵表示の例	 この絵表示は絶対してはいけない内容です。  この絵表示は必ず守るべき内容です。
-------	---

お読みになった後は、ご使用になる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

- ＜免責事項について＞
- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・外観、仕様は商品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- ❌ 下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤動作を招くおそれがあります。

- ❌ ・高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所、湿気の多い場所での使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

⚠ 警告

- ❌ 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ❌ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

- ❗ 絶対に改造、分解、修理しないでください。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

- ❗ 次のような疾患のある方は医師と相談の上ご使用ください。
 - ・心臓疾患 ・有熱性疾患 ・急性疾患 ・感染症疾患
 - ・血圧異常 ・血友病疾患 ・悪性腫瘍 ・てんかん
 - ・糖尿病 ・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患(疼痛性)
 - ・レーシック手術を受けた方 ・骨粗しょう症の方
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 次のような方は絶対に使用しないでください。
 - ・顔面の神経障害、皮膚知覚障害のある方
 - ・骨折、整形手術などで顔面にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
 - ・交通事故などによる頭部および顔面に後遺症がある方
 - ・小児や成長期の子供、およびご自身で意思表示の出来ない方

事故やトラブルの原因になります。

- ・アレルギー体質の人、金属アレルギーのある方
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
- ・敏感肌の方
- ・皮膚感覚の弱い方

肌や身体のトラブルの原因になります。

- ・妊娠中、授乳中、生理中、出産前後の方

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

- ❗ 下記のような場合や部位には使用しないでください。
 - ・体調がすぐれない時や発熱時
 - ・飲酒後や薬を服用した時や疲労が激しい時
 - ・肌に傷や湿しん、はれもの、にきび、化膿性疾患のある場合およびその部位
 - ・眼球やまぶた、およびのどとけ
 - ・当日、脱毛処理をした部位
 - ・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合およびその部位
 - ・整形手術をした部位

肌や身体のトラブルの原因になります。

- ❗ ・乳幼児、子供の手の届くところでは絶対に使用しないでください。また置かないでください。
 - ・使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
 - ・必ず痛くないレベルで使用してください。強すぎると接触部にトラブルを起こすおそれがあります。
 - ・使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子をみながら使用してください。

肌や身体のトラブルの原因になります。

⚠ 注意

- ❌ 使用部位に、けがや痛みがある場合には絶対に使用しないでください。

- ❌ 長時間同じ箇所にヘッドをあて続けないでください。

皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。

- ❌ 他の機器との併用は、絶対にしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

- ❌ 眠りながら使用しないでください。

- ❌ 運転しながら使用しないでください。

思わぬ事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- ❌ 本体は絶対に濡らさないでください。

感電やショート、発火の原因となります。

- ❌ 本体を落としたりぶつけたりして破損したら、絶対に使用しないでください。

けがや故障のおそれがあります。

- ❌ 本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないでください。

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 使用するときは必ず、電源スイッチなど各機能が正常に動作することを確認してから使用してください。

- ❗ しばらく使用しなかった時は、本体が正常に動作することを確認してから使用してください。

事故やけがのおそれがあります。

- ❗ 本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしないでください。風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしないでください。

- ❗ 水洗いしないでください。使用後はやわらかい布かティッシュなどで拭きとり、清潔に保管してください。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

- ❗ 必ず守ってください。
 - ・電池に表示してある注意内容を必ず守る。
 - ・電池は⊕⊖極を確かめ正しく入れる。
 - ・使い切った電池は、すぐに取り出す。
 - ・長期間使用しないときは電池を取り出しておく。
 - ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - ・充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。

守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

- ❗ 直射日光のあたる場所、高温多湿な環境での使用や保管は絶対にしないでください。

故障や劣化のおそれがあります。

- ❗ 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱している等異常が起きたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。

火災などの原因となります。

- ❗ つけまつげ、まつげエクステをしている場合は、本製品が触れないようご注意ください。

つけまつげ、まつげエクステの破損や皮膚を傷つけたり炎症などのおそれがあります。

- ❗ 使用中、強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲルをご使用することをおすすめします。それでも強い痛みを感じる場合は使用を中止してください。

肌や身体のトラブルの原因になります。

本書は商品到着日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。修理・交換に際しましては事前にご購入元までご連絡をお願いします。詳細は下記保証規定をご参照ください。

保証規定

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、ご購入から一年以内は無料で修理・交換いたします。
2. 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。※ご郵送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って修理させていただきます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - イ. ご購入後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ハ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - ニ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - ホ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - ヘ. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - ト. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。