


Branfine

super triple booster


取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


各部名称

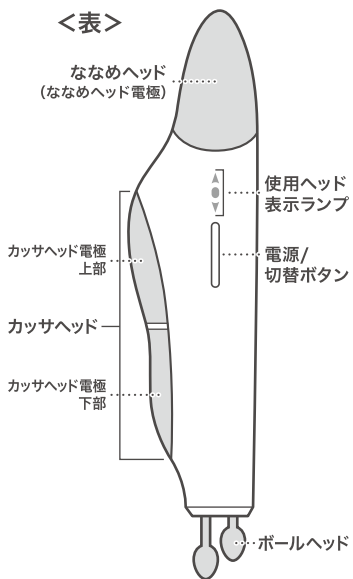


＜裏＞

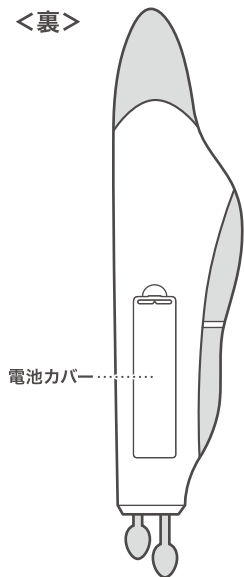

電池の入れ方

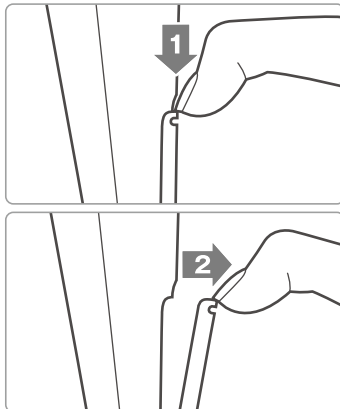


①本体裏側にカバーを外すためのくぼみがあるので、爪などを入れて引っかけ、カバーを軽く下に押し込みながら手前に引いて外します。
※けがをしないようにご注意ください。

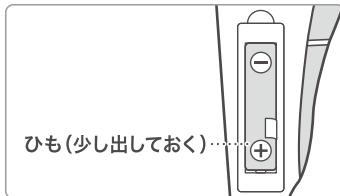

②単4電池のプラス側、マイナス側の向きを確認し、ひもは電池の下になるようにして電池を入れてください。
※ひもは電池を取り外しやすくするためのものです。
③電池カバーを元に戻してください。

電池の取り出し方

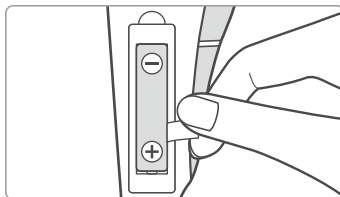


ひもを手前に引っ張り電池を取り出します。

電池の交換時期

電池の残量がわずかになるとバイブレーションが弱くなったり、途中で動作が停止します。また、使用ヘッド表示ランプが消灯します。そのような場合は新しい電池にお取り替えください。

使用ヘッド表示ランプについて

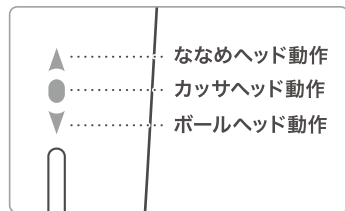

使用ヘッド表示ランプは、上図の通り点灯している箇所ヘッドが動作します。電源/切替ボタンを押すことで使用ヘッドの切り替えが可能です。

※商品の構造上、使用ヘッド表示ランプが点灯していないヘッドもバイブレーションの振動が感じられます。

使用方法

- ①電源/切替ボタンを長押しして電源を入れてください。
- ②使用したいヘッドが動作するように、電源/切替ボタンを押してください。
- ③動作しているヘッドをお肌にあて、すべらせるようにしてお使いください。
- ④使用後は使用ヘッド表示ランプが消灯するまで電源/切替ボタンを押して電源を切ってください。

使用上の注意


- 使用前に必ず手を拭いてからご使用ください。
- 同じ場所に長くともめずに動かしながご使用ください。
- 強く押しつけるのではなく、お肌の上をすべらせるようにしてお使いください。
- 使用中にEMSによる強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲルをご使用することをお勧めします。
※それでも強い痛みを感じる場合は使用を中止してください。
- 使用時間は1箇所5～10分程度が目安ですが、お肌の状態をみながらご使用ください。1度に長い時間をかけるのではなく、毎日少しずつ継続的にケアをしましょう。
- カッサによる痕や赤み(カッサ痕)が残っている箇所は、消えてからケアをしてください。
- EMS(微弱電流)の感じ方には個人差があります。

お手入れ方法

使用後はやわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取り、清潔に保管してください。
※水洗いはしないでください。
※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。


カッサヘッド使用時の注意点

カッサヘッドからEMS(微弱電流)を流すためには、カッサヘッドの2つの電極がお肌に触れるように使用してください。

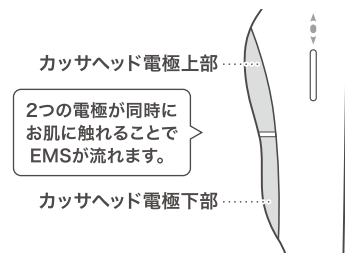

ななめヘッド使用時の注意点

ななめヘッドからEMS(微弱電流)を流すためには、カッサヘッド電極下部を握るように本体を持ち、ななめヘッド電極を使用部位にあてて使用してください。
※ななめヘッドが動作していることを確認してから握ってください。カッサヘッドの動作中に握ってしまうと、思いがけず手へEMSの刺激が伝わります。

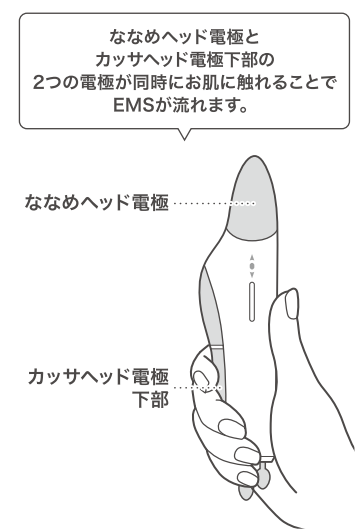

※ボールヘッド使用時は2つのボールがお肌に触れていればEMSが流れます。

仕様

電源方式：単4形電池1本
※付属電池はテスト用です
商品サイズ：約W39×D25×H172mm
商品重量：約46g(電池除く)
素材：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス、メッキ

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

△ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

△ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

△ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

<図記号の例>

⊖ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

<免責事項について>

・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・外観、仕様は商品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

△ 危険

⊖ 次のような医用電気機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。
・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型の医用電気機器

医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作を招くおそれがあります。

△ 警告

⊖ 取扱説明書上にある使用方法以外では使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

⊖ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。

⊖ 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やほこりっぽい場所での使用や放置はしないでください。

発熱・発火・破裂の原因になります。

⊖ 改造、分解、修理はしないでください。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

⊖ 次のような疾患のある方は医師と相談の上ご使用ください。
・心臓疾患 ・有熱性疾患 ・急性疾患
・感染症疾患 ・血圧異常 ・血友病疾患
・悪性腫瘍 ・てんかん ・糖尿病
・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患（疼痛性）
・レーシック手術を受けた方
・骨粗しょう症の方
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルの原因になります。

⊖ 次のような方は使用しないでください。
・使用部位に神経障害、皮膚知覚障害のある方
・骨折、整形手術などで顔面に金属、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
・使用部位に交通事故などによる後遺症がある方
・小児や成長期の子供、およびご自身で意思表示の出来ない方

事故やトラブルの原因になります。

・アレルギー体質の方、金属アレルギーのある方
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
・敏感肌の方
・皮膚感覚の弱い方

肌や身体のトラブルの原因になります。

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

⊖ 次のような場合や部位には使用しないでください。
・体調がすぐれない時や発熱時
・飲酒後、薬を服用した時、疲労が激しい時、寝不足の時
・肌に傷や湿しん、はれもの、にきび、化膿性疾患のある場合およびその部位
・眼球やまぶた、およびのどぼとけ
・当日、脱毛処理をした部位
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合およびその部位
・整形手術をした部位

肌や身体のトラブルの原因になります。

⊖ 乳幼児、子供の手の届くところでは使用しないでください。また置かないでください。

事故やけがをする原因になります。

⊖ 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。

火災などの原因となります。

❗ 使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

❗ 使いはじめの方は、必ずお肌の様子をみながら使用してください。

肌や身体のトラブルの原因になります。

△ 注意

⊖ 他の機器との併用はしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

⊖ 本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないでください。

事故やトラブルの原因になります。

⊖ 長時間同じ箇所へヘッドをあて続けしないでください。

皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。

⊖ 本体を落としたりぶつけたりして破損したら、使用しないでください。

けがや故障のおそれがあります。

⊖ 本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしないでください。風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしてしないでください。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

⊖ 眠りながら使用しないでください。
⊖ 運転しながら使用しないでください。

事故や身体のトラブルの原因になります。

❗ 使用する時は必ず、電源ボタンなど各機能が正常に作動することを確認してから使用してください。

❗ しばらく使用しなかった時は、本体が正常に作動することを確認してから使用してください。

事故やけがのおそれがあります。

❗ 使用後はやわらかい布かティッシュなどで汚れを拭き取り、清潔に保管してください。

故障の原因となります。

❗ つけまつげ、まつげエクステをしている場合は、本体が触れないよう注意してください。

つけまつげ、まつげエクステの破損や皮膚を傷つけたり炎症などのおそれがあります。

❗ アクセサリー類が引っかからないように注意してください。

アクセサリーの破損やけがの原因になります。

❗ 電池に関して次の内容を必ず守ってください。
・電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
・電池は⊕⊖極を確かめ正しく入れてください。
・使い切った電池はすぐに取り出してください。
・長期間使用しない時は電池を取り出しておいてください。
・使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
・充電式ニッケル水素電池を使用する時は、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用してください。

守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

❗ 使用中に強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲルをご使用することをおすすめします。それでも強い痛みを感じる場合は使用を中止してください。

❗ カッサによる痕や赤み（カッサ痕）が残っている箇所は、消えてからケアをしてください。

肌や身体のトラブルの原因になります。

本書は商品到着日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。修理・交換に際しましては事前にご購入元までご連絡をお願いします。詳細は下記保証規定をご参照ください。

保証規定

- 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、ご購入から一年以内は無料で修理・交換いたします。
- 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。
※ご送付される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布などで包んでください。
- 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って修理させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
イ. ご購入後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ハ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
ニ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
ホ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
ヘ. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
ト. 一般家庭以外（たとえば業務用等）に使用された場合の故障および損傷

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

発売元 株式会社ヴァルテックス
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-11-2 1F
お客様窓口：03-6381-6336
（受付時間/平日10:00～17:00）